

Einzigartige Haut- und Nagelfräser. Exklusiv von Komet Medical.

Die neue (G)P-Verzahnung ermöglicht eine besonders effiziente und schnelle Behandlung sowohl bei starker Hyperkeratose als auch bei mykotischen Nägeln. Ob Hornhaut und Schrüden an der Ferse, Schwielen an der Fußsohle, verhärtete Hühneraugen oder Nagelmykosen - mit diesen speziell für den Einsatz in der Podologie entwickelten Hartmetallfräsern erzielen Sie mühelos und schmerzfrei hervorragende Behandlungsergebnisse. Diese lassen sich beim Einsatz von Fußpflegegeräten mit Spraykühlung noch optimieren, da das Eindringen des Fräasers in die erweichten Haut- und Nagelareale erleichtert wird. Die Fräser sind in zwei Stärken und drei Größen erhältlich und eignen sich auch für die Behandlung der Risikogruppe Diabetiker.

Die erste Hartmetallverzahnung, die speziell für Podologen entwickelt wurde.

Zum effizienten und schnellen Beschleifen von verhornten Hautschichten und Nägeln.



H79GP - kompromisslos für die Bearbeitung von mykotischen Nägeln





Punktuelle Hornhautbearbeitung

Sortiment | P-Hartmetallfräser



GP- und P-Fräser

- neu entwickelte Instrumente mit grober und mittlerer Diamantverzahnung
- einsetzbar auch bei niedriger bis mittlerer Umdrehungszahl in der Trockentechnik (15.000 - 20.000 min⁻¹)
- weniger Hitzeentwicklung durch bessere Oberflächenkühlung
- geringeres Zusetzen des Spanraumes

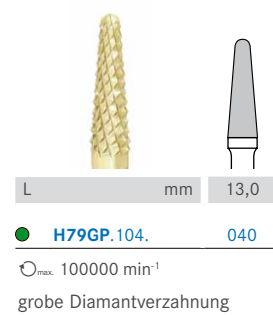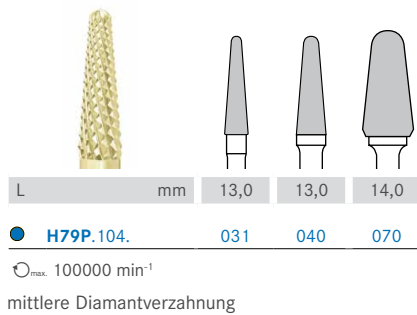

Fräserständer

aus eloxiertem Aluminium,
sterilisierbar

Unsere besondere
Empfehlung



für 15 Instrumente

A700S